



TECHNIEK

EERSTE GEBRUIK

Als dit een nieuwe inhalator is, moet u die voor gebruik eerst klaarmaken door het patroon in de Novolizer® te plaatsen.



- 1 Houd de **Novolizer®** horizontaal.



- 2 Bovenaan de **Novolizer®** zit een klepje. **Duw op de geribbelde delen, schuif het klepje naar voren en til het op.**




- 3 Verwijder de beschermfolie van het **potje met de vulling**.



- 4 Neem de vulling uit het potje en noteer de datum van openen op de vulling.



- 5 Plaats de vulling in de inhalator (met de dosisteller naar het mondstuk gericht).

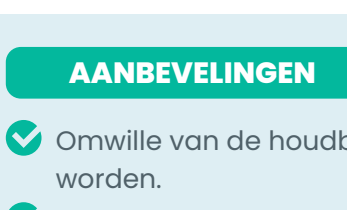


- 6 Plaats het klepje weer op de **Novolizer®** en klik het vast door het naar achteren te schuiven. De **Novolizer®** is nu klaar voor gebruik.

AANBEVELINGEN

- ✓ Omwille van de houdbaarheid mag het potje met de vulling pas vlak voor gebruik geopend worden.
- ✓ Het patroon mag maximum 6 maanden na openen gebruikt worden.



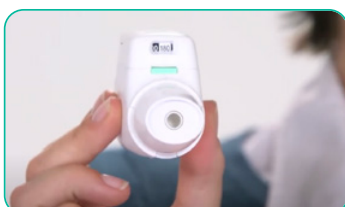

- 1 Ga rechtop zitten.
- 2 Neem de beschermdop van het mondstuk door aan beide kanten op de geribbelde delen te duwen.
- 3 Houd de **Novolizer**[®] horizontaal. Druk de drukknop volledig in en laat dan los. U hoort een klik en de kleur van het controlevenster verandert van rood naar groen. De **Novolizer**[®] is nu klaar voor gebruik.
- 4 Blijf de **Novolizer**[®] horizontaal houden.
- 5 Adem rustig en volledig uit (**nooit uitademen in de inhalator**).
- 6 Neem het mondstuk in de mond (tussen de tanden) en omsluit het goed met de lippen.
- 7 Buig het hoofd licht achterover.
- 8 Adem **snel en diep** in, zodat u een klik hoort die aangeeft dat de dosis vrijkomt. Blijf daarna verder inademen. **Bij een correcte inhalatie verandert de kleur van het controlevenster van groen naar rood.** Inhaleer opnieuw krachtig als het venster op groen is blijven staan.
- 9 Houd de adem 5 à 10 seconden in (of zolang als comfortabel is) **en neem ondertussen de Novolizer**[®] **uit de mond**.
- 10 Adem rustig uit door de mond (**nooit uitademen in de inhalator**).
- 11 Als u meerdere dosissen moet nemen: herhaal stap 3 tot en met 10.
- 12 Plaats de beschermdop weer op het mondstuk.
- 13 Spoel de mond met water (**niet inslikken**).

AANBEVELINGEN

- ✓ Werp de **Novolizer**[®] weg als het patroon leeg is. Bij elke nieuwe verpakking is een gratis **Novolizer**[®] inbegrepen.
- ✓ Bewaar de **Novolizer**[®] op een droge en koele plaats.
- ✓ Adem nooit uit in de **Novolizer**[®].
- ✓ De **Novolizer**[®] is leeg als de dosisteller op nul staat. Controleer dit tijdig.

