

# Autohaler®



## TECHNIEK

### EERSTE GEBRUIK

Als dit een nieuwe inhalator is of als u de inhalator gedurende twee weken of langer niet gebruikt hebt, moet u de inhalator voor gebruik eerst klaarmaken door twee dosissen op de volgende wijze in de lucht te verstuiven:



- 1 Neem de beschermdop van het mondstuk door het lipje aan de achterzijde naar beneden te trekken.



- 2 Schud de **Autohaler®** krachtig gedurende enkele seconden.



- 3 Houd de **Autohaler®** rechtop. Duw de hefboom bovenaan het toestel naar boven.



- 4 Richt de opening van het mondstuk van u weg, zodat het vrijgekomen geneesmiddel in de lucht wordt verstoven. Om een eerste dosis vrij te maken, duwt u het schuifje onderaan het toestel in de richting van de pijl.


- 5 Duw de hefboom weer naar beneden.

- 6 Herhaal de stappen 2 tot en met 4 om een tweede dosis te verstuiven. Nadat de tweede dosis is vrijgekomen, duwt u de hefboom opnieuw naar beneden. De **Autohaler®** is nu klaar voor gebruik.

### AANBEVELINGEN

- ✓ Bewaar de **Autohaler®** op een droge en koele plaats.
- ✓ Adem nooit uit in de **Autohaler®**.
- ✓ De **Autohaler®** is leeg als er niets zichtbaars meer vrijkomt, maar u overschrijdt het aangegeven aantal dosissen beter niet.



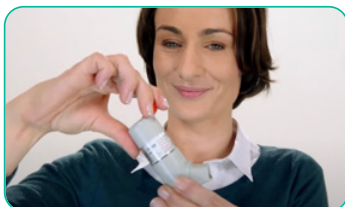

- 1 Ga rechtop zitten.
- 2 Neem de beschermdop van het mondstuk door het lipje aan de achterzijde naar beneden te trekken.
- 3 Schud de **Autohaler**® krachtig gedurende enkele seconden.
- 4 Houd de **Autohaler**® rechtop. Duw de hefboom bovenaan het toestel naar boven. De **Autohaler**® is nu geladen.
- 5 Blijf de **Autohaler**® rechtop houden en zorg dat uw hand de inhaleringsopening aan de onderzijde niet afsluit.
- 6 Adem rustig en volledig uit (**nooit uitademen in de inhalator**).
- 7 Neem het mondstuk in de mond (tussen de tanden) en omsluit het goed met de lippen.
- 8 Buig het hoofd licht achterover.
- 9 Adem langzaam en diep in, u hoort een klik die aangeeft dat de dosis vrijkomt. Blijf daarna langzaam en volledig verder inademen.
- 10 Houd de adem 5 à 10 seconden in (of zolang als comfortabel is) **en neem ondertussen de Autohaler**® uit de mond.
- 11 Adem rustig uit door de mond (**nooit uitademen in de inhalator**).
- 12 Breng de hefboom weer naar beneden.
- 13 Als u meerdere dosissen moet nemen: herhaal stap 3 tot en met 12.
- 14 Plaats de beschermdop weer op het mondstuk.
- 15 Spoel de mond met water (**niet inslikken**).

